



medi

medi Knie-Sortiment

Indikationsgerechte Therapie
mit Bandagen und Orthesen

NEU!
medi®
Smartfit OA

medi. ich fühl mich besser.

A full-page photograph of a middle-aged man with grey hair and a beard, smiling and walking towards the camera. He is wearing a dark olive-green bomber jacket over a light blue collared shirt, light blue cargo shorts, and white sneakers. A blue and white knee brace is worn on his right knee. A dark blue strap with white text is slung diagonally across his chest. The background is a modern, light blue architectural structure with large glass panels and metal beams.

Liebe Leserin Lieber Leser

mit dem hochwertigen Knie-Sortiment von medi bieten wir Ihnen ein breites Produktangebot zur indikationsgerechten Behandlung Ihrer Patient:innen.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Übersicht der medi Hilfsmittel zur Führung, Stabilisierung, Entlastung und Immobilisierung. Dabei steht der Therapie-Erfolg und die Compliance Ihrer Patient:innen immer im Vordergrund.

4
medi® Soft OA light

5
NEU: medi® Smartfit OA

6
M.4®s OA comfort

8
medi Rehab® one

9
Genumedi®

10
Genumedi® E+motion®

11
Genumedi® PA

12
Genumedi® PT

13
Genumedi® PSS

15
companion® patella

16
Genumedi® pro

17
Stabimed® pro RICE

18
Stabimed® RICE

19
Stabimed® pro

20
Stabimed®

21
Collamed® / Collamed® long

22
medi PT control®

23
M.4s® comfort

24
M.4s® PCL dynamic

25
M.4 X-lock®

26
medi® ROM

27
medi® Classic

28
medi® Classic air

29
medi PTS®

30
medi® Jeans

31
Sorglospaket

33
Rezeptierung

35
Indikationsübersicht

medi® Soft OA light

Knie-Softorthese zur Entlastung

Hilfsmittelnummer: 23.04.04.0004

Indikationen

Alle Indikationen, die eine Entlastung eines Kompartiments nach 3-Punkt-Entlastungsprinzip und zusätzliche physiologische Führung des Kniegelenks benötigen, zum Beispiel:

- Bei unilateraler Kniegelenksarthrose
- Nach Meniskuseingriffen

Therapeutischer Nutzen:

- Entlastung des lateralen bzw. medialen Kompartiments durch 3-Punkt-Entlastungsprinzip
- Individuell und einfach einstellbare Varus- / Valgus-Entlastung über diagonales Gurtsystem

- Die patentierte dynamische Gurtstraffung sorgt für eine adaptive Entlastung des Kniegelenks während der Bewegung. Folge: größte Entlastung des Kniegelenks, wenn die Belastung am höchsten ist
- Die Entlastung des Kniegelenks sorgt für Schmerzhinderung und unterstützt die Mobilität / Aktivität der Patienten
- Wirkt einem seitlichen Ausbrechen des Beins in die schmerzhafte Fehlstellung entgegen

Warum medi Soft OA light?

- Individuell und einfach einstellbare Varus / Valgus-Entlastung über diagonales Gurtsystem
- Einfaches Anziehen durch Schlupf-Wickelversion




Per QR-Code oder Short-URL **medi.biz/oa** zu den therapiebegleitenden Übungen und weiteren Informationen



① Einfache Handhabung

Die kombinierte Schlupf-Wickel-Konstruktion ermöglicht ein einfaches Anlegen und gleichzeitig ein schnelles erstes Ausrichten und Fixieren am Bein.

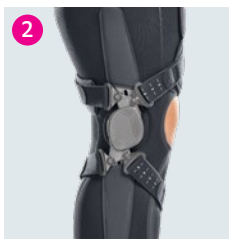


② Optimaler Sitz

Beidseitige Gelenke und die Silikon-Punkt-Beschichtung unterstützen den sicheren Sitz am Bein.


③ Korrekte Positionierung

Eine Aussparung im Bereich der Patella dient als Positionierungshilfe für einen korrekten Sitz der Orthese.

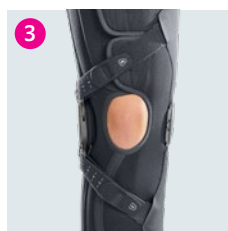

④ Angenehmes Tragegefühl

Die durchdachte Konstruktion führt die Gurte an der empfindlichen Kniekehle vorbei und kann so unangenehmen Druck vermeiden. Das weiche Material in der Komfortzone sorgt zusätzlich für Tragekomfort und Atmungsaktivität.

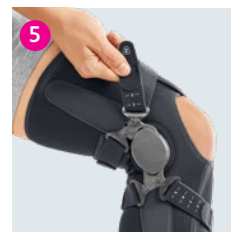

⑤ Individuelle Entlastung

Durch die manuelle Gurtstraffung können Patient:innen anhand einer Skala die gewünschte Entlastung einfach selbst einstellen.

medi[®] Jeans

Knieorthese zur Immobilisierung

Hilfsmittelnummer:

0° 23.04.01.0010

30° 23.04.01.1004



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter Position notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Patellaluxation
- Nach kniegelenksnahen Frakturen

Therapeutischer Nutzen

- Ruhigstellung in gestreckter (0°) bzw. gebeugter (30°) Position
- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen

Warum medi Jeans?

- Optimales An- und Ablegen durch Wickel-Version
- Hautfreundliches Material und herausnehmbare Stabilisierungsstäbe

Produkt-Vorteile

Einfaches An- und Ablegen ohne Anwinkeln des Knies durch offene Wickelkonstruktion.

Herausnehmbare und anpassbare Stabilisierungsstäbe.

Angenehmes, hautfreundliches Material, waschbar.



Blau

Zweckbestimmung: medi jeans in 0° bzw. 30° ist eine Knieorthese zur Immobilisierung.

Knie-Softorthese zur Entlastung und Führung

Hilfsmittelnummer: 23.04.04.1035

Indikationen

Alle Indikationen, die eine Entlastung eines Kompartiments nach 3-Punkt-Entlastungsprinzip, eine zusätzliche physiologische Führung und gegebenenfalls eine Bewegungseinschränkung des Kniegelenks benötigen, zum Beispiel:

- Bei unilateraler Kniegelenksarthrose
- Nach Knorpelchirurgie oder Knorpelaufbau
- Nach Meniskuseingriffen

Therapeutischer Nutzen:

- Entlastung des lateralen bzw. medialen Kompartiments durch 3-Punkt-Entlastungsprinzip
- Individuell einstellbare Varus- / Valgus-Entlastung

- Die Entlastung des Kniegelenks sorgt für Schmerzhinderung und unterstützt die Mobilität / Aktivität der Patienten
- 3-Punkt-Mechanismus und die beidseitigen Gelenkschienen stabilisieren das Kniegelenk
- Moderate Kompression des Gestricks sorgt für positive Wirkung bei Schwellungszuständen

Warum medi Smartfit OA?


- Individuell regulierbare Entlastung durch 3-Punkt-Prinzip durch bidirektional einstellbaren Seilmechanismus




Per QR-Code oder Short-URL medi.biz/oa zu den therapiebegleitenden Übungen und weiteren Informationen




- ① FORTSCHRITTLICHES BOA FIT SYSTEM**
Praktischer Drehmechanismus sorgt für mühelose und millimetergenaue Anpassbarkeit: festziehen oder lockern, auch unter der Kleidung.

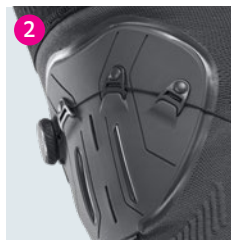


- ② EFFEKTIVE ENTLASTUNG**
Das 3-Punkt-Prinzip entlastet das Kniegelenk effektiv – mit optimaler Druckverteilung durch großflächige Platten an Ober- und Unterschenkel.

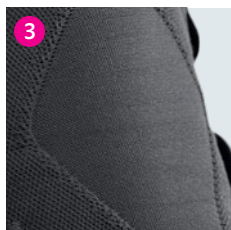

- ③ INNOVATIVES TEC-KNIT**
Das nahtlose Gestrück mit extradünnen Funktionszonen an Kniekehle und Patella bietet perfekte Passform und besonderen Tragekomfort.

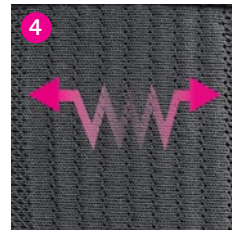

- ④ FLEXIBLE DEHNUNGSRIPPEN**
Strategisch platzierte Dehnungsrippen tragen zu einer optimalen Passform bei.

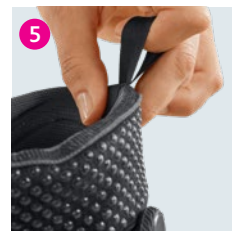

- ⑤ INTEGRIERTE ANZIEHHILFE**
Innenliegende Fingerlaschen ermöglichen ein bequemes Anlegen der Orthese.



- ⑥ UNTERSTÜTZENDES HAFTBAND**
Bewährtes Precise-Fit-Haftband mit Silikonbeschichtung sorgt für sicheren Halt bei vollem Bewegungsumfang.

M.4®s OA comfort

4-Punkt-Hartrahmenorthese zur Varus- / Valgus-Entlastung und Stabilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.04.04.2003

Indikationen

Alle Indikationen, die eine Entlastung eines Kompartiments nach dem 3-Punkt-Prinzip, eine physiologische Führung und Stabilisierung nach dem 4-Punkt-Prinzip und ggf. eine Bewegungseinschränkung des Kniegelenks benötigen, wie z. B.:

- Schwere mediale oder laterale Gonarthrose (mind. Grad III) in Verbindung mit komplexer Bandinstabilität
- Vor HTO (Umstellungsosteotomie) zur unikompartimentellen Entlastung bei schwerer Gonarthrose (Brace-Test)
- Nach Knorpelchirurgie oder Knorpelaufbau
- Nach Meniskuseingriffen

Therapeutischer Nutzen

- Entlastung des lateralen bzw. medialen Kompartiments durch 3-Punkt-Entlastungsprinzip
- Stabilisierung des Kniegelenks durch 4-Punkt-Stabilisierungsprinzip
- Individuell und einfach einstellbare Varus- / Valgus-Entlastung über gelenknahe Einstellgelenke
- Spürbare Entlastung / Entlastet gezielt während der Belastung
- Schmerzreduzierung durch Druckentlastung auf der betroffenen Seite des Gelenks
- Wirkt einem seitlichen Ausbrechen des Beins in die schmerzhafte Fehlstellung entgegen

Warum M.4®s comfort?

- Zuverlässige Druckentlastung betroffener Strukturen durch gelenknahe Varus- / Valgus-Einstellgelenke
- medi Sorglospaket: immer neue und auf Keimarmut geprüfte Orthese

YourPhysioTraining




medi.biz/OA

Per QR-Code oder Short-URL medi.biz/oa zu den therapiebegleitenden Übungen und weiteren Informationen



① INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Das umfangreiche Polster- und Keileset bietet eine patientenindividuelle Anpassung.

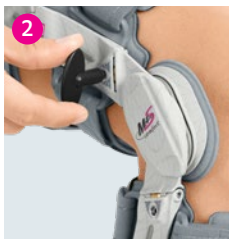


② BEWÄHRTE ENTLASTUNG

Die bewährten gelenknahe Varus- / Valgus-Einstellgelenke entlasten effektiv.



③ SCHLANKES DESIGN

Die flache, leichte Rahmenkonstruktion erlaubt ein möglichst bequemes Tragen unter der Kleidung.

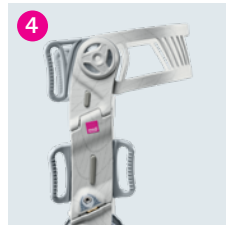

④ OPTIMALE PASSFORM


Die bewegliche Oberschenkelschelle passt sich an verschiedene Formen des Oberschenkels an – besonders während der Bewegung.



⑤ HOHER TRAGEKOMFORT

Doppellagige Kondylenpolster-Überzüge können durch das leichte Gleiten zwischen den beiden Materialschichten Reibstellen auf der Haut reduzieren.

Zweckbestimmung: M.4®s OA comfort ist eine Rahmenorthese zur Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks.

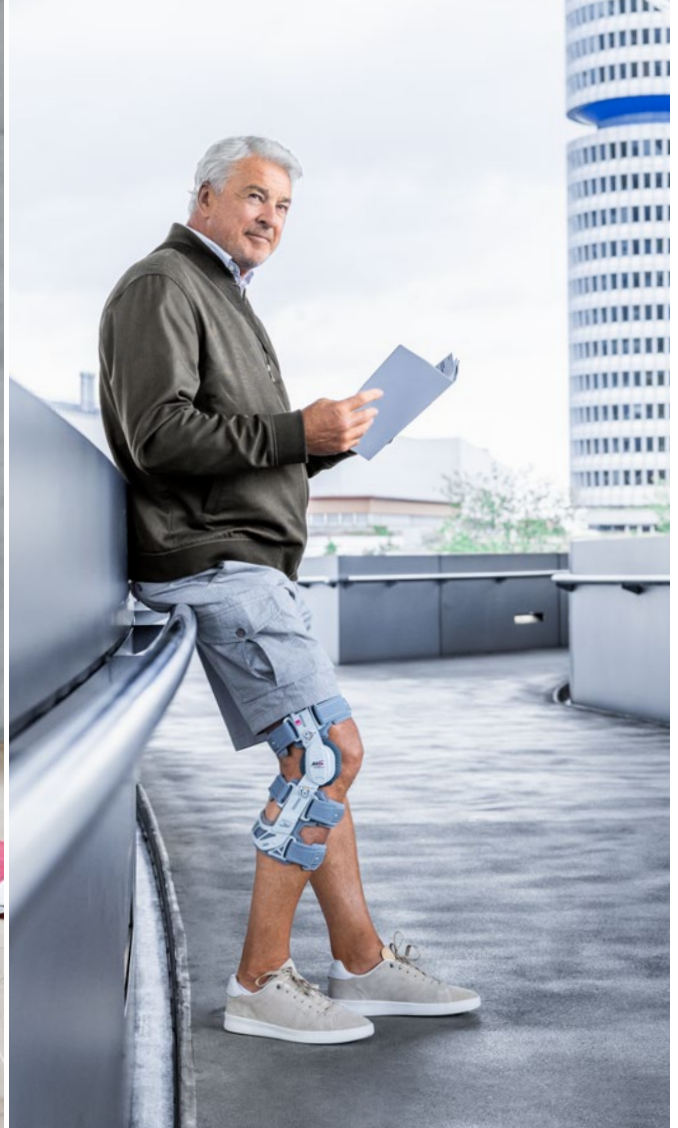

Gonarthrose-Therapie

Patientenindividuelle Versorgung
mit dem medi Gonarthrose Sortiment

medi® Smartfit OA, M.4®s OA comfort,
medi® Soft OA light



medi Rehab[®] one

Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf

Hilfsmittelnummer: 17.06.03.0103

Hilfsmittelnummer Haftrand: 17.99.99.2008



Mit geschlossener und offener Spitze erhältlich

Indikationen

Ödeme

- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme

Therapeutischer Nutzen


- Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von allgemeinen Schwellungszuständen
- Durch kompressiven Druck (Kompressionsklasse I) von außen auf das Gewebe, können bestehende Ödeme reduziert und einer Ödembildung entgegengewirkt werden
- Zur effektiven Ödemtherapie nach orthopädischen Eingriffen und Verletzungen am Bewegungsapparat (an den unteren Extremitäten)

Warum medi Rehab one?

- Positionierungshilfe Knie für leichte und korrekte Handhabung

Der medi Rehab one vereint bewährte medizinische Kompression mit einer neuen Stricktechnologie und cleveren Details.
Die Handhabung wird dadurch leichter, sicherer und komfortabler.

Produkt-Vorteile

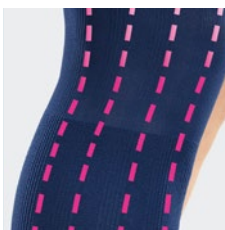

3D-Längsrippen erleichtern das korrekte Anlegen und geben Sicherheit bei der Handhabung.



Eingestrickte Positionierungshilfe unterhalb des Knies für leichte und sichere Handhabung im Alltag.



Mikronoppen-Haftband sensitiv für zusätzlichen Halt und angenehmen Tragekomfort auf der Haut.

Green / Ocean Blue



Varianten



Geschlossene Spitze

Zweckbestimmung: medi Rehab[®] one AG ist ein rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur kompressiven Versorgung der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von postoperativen und posttraumatischen Ödemen und allgemeinen Schwellungszuständen.

medi PTS®

Knieorthese zur Immobilisierung und Entlastung des hinteren Kreuzbandes

Hilfsmittelnummer: 23.04.01.3002



Weitere Produkte für die HKB-Therapie: M.4s PCL dynamic (S. 24)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung und Entlastung des Kniegelenks in mindestens einer Ebene notwendig ist, wie z. B.:

- Nach hinteren Kreuzbandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Knieluxation (postoperativ)
- Nach komplexen Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)


Therapeutischer Nutzen

- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen
- Spezielle Wadenpelotte, die die Wade stützt und ein posteriores Zurücksinken der Tibia begrenzt
- Limitierung der hinteren Schublade bei gleichzeitiger Entlastung des hinteren Kreuzbands

Warum medi PTS®?

- Entlastung des hinteren Kreuzbandes durch posterior tibiales Kissen

Produkt-Vorteile

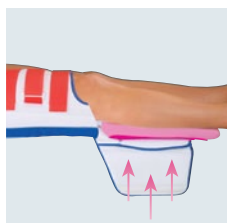

Individuelle Positionierung des Wadenpads.

Einfaches An- und Ablegen ohne Abwinklung des Knies durch offene Wickelkonstruktion.

Individuelle Anpassung an Beinumfang durch 3-teilige Konstruktion und Klettverschluss-technik.

Angenehmes, hautfreundliches und waschbares Material.

Herausnehmbare und anpassbare Stabilisierungsstäbe.

 Weiß

Genumedi®

Komfort-Kniebandage zur Weichteilkompression mit 3D-Silikon-Pelotte

Hilfsmittelnummer: 05.04.01.0009

NEU: Genumedi® extraweit mit Haftband kurz

Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit lokaler / lokalen Druckpelotte(n) um die Kniescheibe notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Leichte Instabilitäten
- Arthrose und Arthritis
- Patellofemorales Schmerzsyndrom

Therapeutischer Nutzen

- Schmerzlinderung und Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch integrierte 3D-Silikon-Pelotte
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Produktvorteile

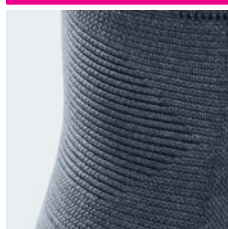



Comfort Zone mit Riffelstruktur und Diamantzentrum für höheren Tragekomfort in der Kniekehle.



3D-Silikon-Pelotte.



Spürbar geringerer Druck auf die Kniescheibe durch offene Einfassung des Patella-Silikonrings: Die innenliegende Stofftasche, in der sich die Pelotte befindet, ist in der Mitte offen und nur an ihrem äußeren Rand mit dem Gestrick verbunden. Somit bleibt das komplette Gestrick an der Kniescheibe elastisch und der Druck wird reduziert.

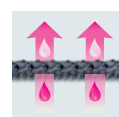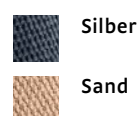

Clima Comfort



Clima Fresh



New knit tech



Non-Slip

Neue Genumedi® Vielfalt

passgenaue Varianten für individuelle Beinformen



Vergleichslinie: Höhe oberes Bandagenende Genumedi extraweit mit Haftband

¹ Es kann zu kleineren Abweichungen bei der Gestricklänge kommen.

Genumedi® E⁺motion®

Performance-Kniebandage zur Weichteilkompression mit 3D-Silikon-Quarz-Pelotte

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit lokaler / lokalen Druckpelotte(n) um die Kniescheibe notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Leichte Instabilitäten
- Arthrose und Arthritis
- Patellofemorales Schmerzsyndrom

Erhältlich in den Größen 1–7

Hilfsmittelnummer 05.04.01.0009

PERFORMANCE MATERIAL

Merino-Wolle:

geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

Dry Skin Technologie

für optimales Feuchtigkeitsmanagement.



PERFORMANCE FIT

Perfect-Fit-Haftband – sitzt bei jeder Bewegung.

Grip-Ons für einfaches Anziehen.

XL-Bewegungszone für mehr Performance.

Ergonomische Form.

Passgenaue Pelotte für jede Größe.


PERFORMANCE COMPRESSION

3D-Silikon-Quarz-Pelotte zur Massage und Reduktion von Schwellungen.

Spürbar mehr Stabilität und Power¹ im Gestrück – für ein noch besseres Körpergefühl.

Therapeutischer Nutzen

- Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch integrierte 3D-Silikon-Pelotte.
- Das kompressive Gestrück kann die Propriozeption verbessern. Eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks.

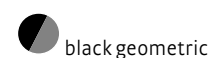

¹ Rückstellkraft im Gestrück

Genumedi® PA

Knieorthese zur Entlastung des Sehnenansatzes Pes anserinus

Hilfsmittelnummer: 23.04.05.0019



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges und benachbarter anatomischer Strukturen (z. B. Pes anserinus) notwendig ist, wie z. B.:

- Pes anserinus Syndrom
- Pes anserinus Bursitis
- Pes anserinus Tendinopathie
- Postoperative Schmerzzustände am Pes anserinus
- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Arthrose und Arthritis

Therapeutischer Nutzen

- Pes anserinus Pelotte mit druckregulierendem Gurtsystem
 - Stimulation und Entlastung des Pes anserinus Sehnenansatzes und daraus resultierende Schmerzreduktion
- Patella Silikon-Pelotte
 - Sichere Führung der Patella (Patella-Ring lateral verstärkt)
- Detonisierungpelotte M.vastus lateralis
 - Triggerpunkt-Ansprache zur Entspannung des äußeren Oberschenkelmuskels (M. vastus lateralis)

Warum Genumedi® PA?


- Individuelle und punktgenaue Entlastung des Sehnenansatzes Pes anserinus.

Kostenlos in jeder Verpackung

Trainings-Band + QR-Code zu therapiebegleitenden Übungen!



Produkt-Vorteile

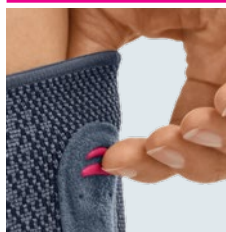

Grip-Ons: Seitliche Griffknöpfe erleichtern zusätzlich das Anziehen.



Gurtsystem:

- Druck-Regulierung auf den Sehnenansatz des Pes anserinus
- Kein Einschneiden dank versetzter Gurtanordnung



Vierteiliges Pelotten System mit 3D-Profil für eine sichere Führung und Stabilisierung der Kniescheibe sowie punktgenaue Entlastung des Pes anserinus Sehnenansatzes.


Varianten



Genumedi® PA extraweit mit Haftband




Silber

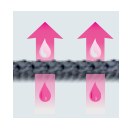

Clima Comfort




Clima Fresh

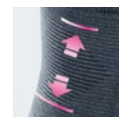

Comfort Zone



Open enclosure

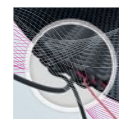

New knit tech



Non-Slip

Zweckbestimmung: Genumedi® PA ist eine Orthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges.

Genumedi® PT

**Knieorthese zur Verbesserung
der Patellaführung**

Hilfsmittelnummer: 23.04.05.0012



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, wie z. B.:

- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Patella maltracking
- Lateralisierung der Patella
- Hypermobiler Patella
- Malalignment
- Patella (Sub-)Luxation

Therapeutischer Nutzen

- Detonisierungpelotte mit Regulierungsgurt
 - Triggerpunkt-Ansprache zur Entspannung des äußeren Oberschenkelmuskels (M. vastus lateralis)
 - Gurt zur Druck-Regulierung auf die Pelotte
- Aktivierungspelotte mit Patella-Silikon-Ring
 - Aktivierung des inneren Oberschenkelmuskels (M. vastus medialis)

Warum Genumedi® PT?

- Wiederherstellung des muskulären Gleichgewichts mittels Detonisierung des M. vastus lateralis über TrP1
- Minimierung des retropatellaren Drucks durch offene Einfassung des Patella-Silikon-rings


Kostenlos in jeder Verpackung
Trainings-Loop + QR-Code zu
therapiebegleitenden Übungen!




Produkt-Vorteile



3D-Patellapelotte:
lateral verstärkt zur
sicheren Führung
Offene Patella-
einfassung: spürbar
geringerer Druck auf die
Kniescheibe
Zwei 3D-Oberschenkel-
Pelotten: gezielte
Ansprache einzelner
Muskeln.

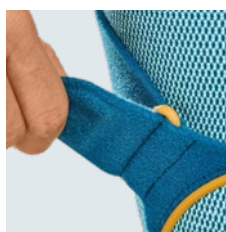


**Individuell einstellbares
Gurtband.**

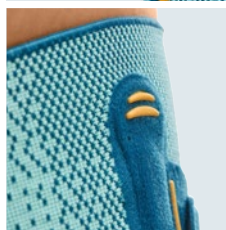


Rutsch-Stopp: Sicherer
Halt durch integrierte
Silikon-Punkt-
Beschichtung



Varianten

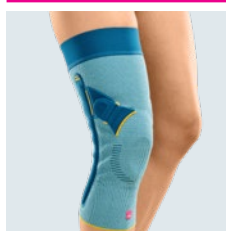

**Genumedi® PT extraweit
mit Haftband**

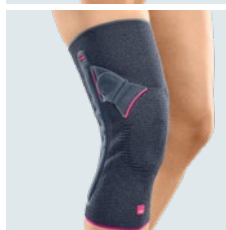


Variante Silber

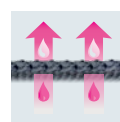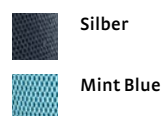

Clima Comfort




Clima Fresh

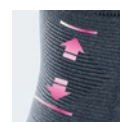

Comfort Zone



Open enclosure

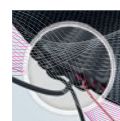

New knit tech



Non-Slip

Zweckbestimmung: Genumedi® PT ist eine Orthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges.

Genumedi® PSS

Knieorthese zur Entlastung der Patellasehnenansätze

Hilfsmittelnummer: 23.04.05.0015



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, wie z. B.:

- Patellaspitzensyndrom (Jumper's Knee)
- Morbus Osgood-Schlatter
- Patellofemorales Schmerzsyndrom


Therapeutischer Nutzen

- Zweigeteiltes Pelottensystem mit 3D-Profil:
 - Sichere Führung der Patella durch Patellapelotte mit 3D-Profil
 - Stimulation der Patellasehne durch Sehnenpelotte mit 3D-Frictionsnoppen
 - Schmerzreduktion

Warum Genumedi® PSS?

- Kombination aus kompressivem Gestrick, Silikon-Pelotten und Patellasehnenband mit individueller Druckeinstellung über versetztes Gurtsystem.

Produkt-Vorteile

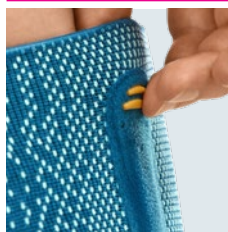

Grip-Ons: Seitliche Griffnoppen erleichtern zusätzlich das Anziehen.



Pelottensystem:

- Sichere Führung der Kniescheibe durch Patellapelotte mit 3D-Profil
- Stimulation der Patellasehne durch Sehnenpelotte mit 3D-Frictionsnoppen



Patella-Strap


- Druck-Regulierung auf die Patellasehne
- Kein Einschneiden dank versetzter Gurtanordnung

Varianten




Genumedi® PSS extraweit mit Haftband

Lyons / Blue

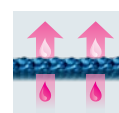


Clima Comfort

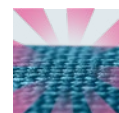


Clima Fresh



Comfort Zone

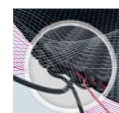

New knit tech

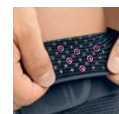

Non-Slip

Kostenlos in jeder Verpackung
Schrägbrett + QR-Code zu
therapiebegleitenden Übungen!



Zweckbestimmung: Genumedi® PSS ist eine Orthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges.



companion® patella – medizinischer Nutzen mittels Studie¹ bewiesen:

companion patella ist eine als Medizinprodukt zugelassene browserbasierte App und gehört zu den Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Sie bietet ein videogestütztes, adaptives Trainingsprogramm für die Indikationen Patellofemorales Schmerzsyndrom, Patellaspitzensyndrom und Patella(erst)-luxation und begleitet Ihre Patient:innen gezielt bei der Rehabilitation. Die Verwendung der DiGA companion patella zeigte im Vergleich zur in Anspruch genommenen empfohlenen Standardtherapie mittels Physiotherapie eine Überlegenheit. Sowohl der medizinische Endpunkt Schmerz als auch der medizinische Endpunkt Kniefunktion haben sich klinisch relevant und statistisch signifikant zur Vergleichsgruppe verbessert.

- 62 % weniger Schmerz (NPRS)

Die Patient:innen konnten ihren Knieschmerz durch das Training mit companion patella um **62 %** reduzieren.

+ 93 % Kniefunktion / Kujala Score

Das Training mit companion patella verbesserte die Kniefunktion um **26 %** und somit um **93 %** mehr als eine Physiotherapie.


Quelle

¹ Ferner et al., The application of a digital therapeutic reveals superior outcome compared to standard care in patients with anterior knee pain - a randomized controlled trial, Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 2025, doi: 10.1007/s00402-025-05787-y, PMID: 40069462
Online veröffentlicht unter DiGA-Verzeichnis (BfArM): <https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis/00998> (Letzter Zugriff: 09.12.2025)

companion® patella proved by Dt. Knie- gesellschaft

Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) für
Patienten mit vorderem spezifischem Knieschmerz

PZN-Nr.: 17850263

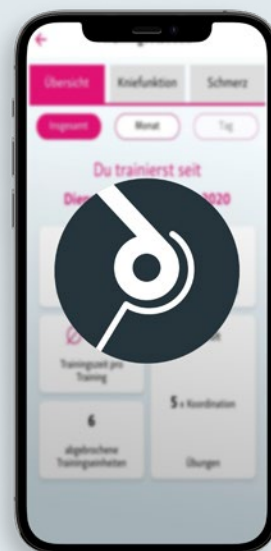

Indikationen

- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Patellaspitzensyndrom
- Patellaerstluxation

Therapeutischer Nutzen

- Digitaler Begleiter für zeit- und ortsunabhängiges Trainieren
- Optimaler Einblick in die Verlaufsdaten der App durch patientengenerierten PDF-Export (Schmerzentwicklung, „NPRS“, Kujala-Score, etc)
- Aktivierung und Nutzung selbstständig durch den Patienten
- Schnelle Versorgung und Motivationsfaktor für das Selbstmanagement der Patienten
- CE-zertifiziertes „DSGVO-konformes Medizinprodukt“

Warum companion® patella?

- Algorithmus gesteuerte, adaptive Bewegungstherapie, ortsunabhängig und jederzeit anwendbar. Ziel ist die Verbesserung der Kniefunktion und des Schmerzzustandes bei vorderem Knieschmerz.

Zugang und weitere Informationen




Per QR-Code oder Short-URL
medi.biz/companion-patella
zu weiteren Informationen.


Ideal in Kombination mit
Knieorthesen inkl. Trainings-
Tool
Genumedi PSS (S. 13) und
Genumedi PT (S. 12)




Funktionen

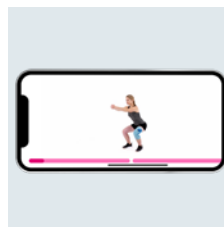


Indikationsspezifisches
Trainings-Programm
mit eigenem
Algorithmus.

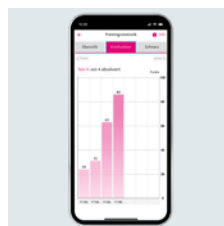

Übersichtliche
Trainingsstatistik
– Therapieverlauf und
Erfolge im Blick
behalten.

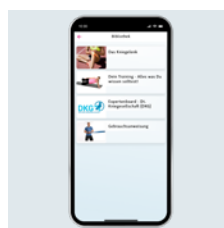

Wissensbibliothek –
alles zum Krankheits-
bild erfahren.

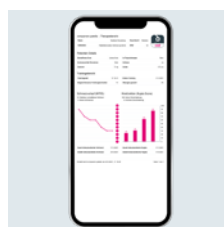

Patientengenerierter
PDF Export.

Zweckbestimmung: Die Digitale Gesundheitsanwendung companion patella ist ein therapeutisches Trainingsprogramm. Die Nutzung ist für Anwender mit diagnostiziertem „Vorderen Knieschmerz“ vorgesehen. Dabei werden den Nutzern individualisierte Therapieinhalte evidenzbasiert und leitliniengerecht für die ärztlich diagnostizierten Indikationen „Patellofemorales Schmerzsyndrom (PFSS)“, „Patellaspitzensyndrom (PSS)“ und „Patellaerstluxation“ zum Eigentraining bereitgestellt. Basierend auf persönlichen Angaben des Anwenders zu Schmerz- und Belastungsempfinden, wird der bewegungstherapeutische Trainingsplan im Verlauf der Therapie kontinuierlich an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst. Zusätzlich bereitet die digitale Gesundheitsanwendung Daten zu Krankheitsverlauf und Trainingsaktivität für den Nutzer graphisch auf. Neben der Bewegungstherapie bietet ein edukativer Bereich innerhalb der digitalen Gesundheitsanwendung sowohl krankheitsspezifische als auch allgemeine medizinische Wissensartikel.
Erläuterung zur medizinischen Zweckbestimmung: Companion patella ist nicht dafür bestimmt, Informationen zu liefern, die für diagnostische oder therapeutische Entscheidungen herangezogen werden.

Genumedi® pro

Knieorthese zur Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.0061



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.:

- Leichte bis mittlere Instabilitäten des Kniegelenks
- Gonarthrose
- Leichte Seitenbandinstabilitäten

Therapeutischer Nutzen

- Schmerzlinderung und Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch integrierte 3D-Silikon-Pelotte
- Stabilisierung und Entlastung des Gelenks durch Zusammenspiel aus kompressivem Gestrick, zusätzlichen Gurten und Easyglide-Gelenken
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern. Eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Warum Genumedi® pro?


- Sichere Positionierung am Bein durch Easyglide-Gelenk und anatomisch vorgeformte Gurte

Kostenlos in jeder Verpackung

medi blox + QR-Code zu therapiebegleitenden Übungen!



Produkt-Vorteile

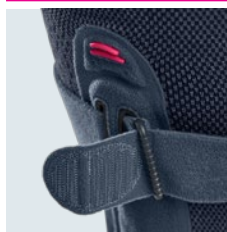

Umlaufende Gurtbänder an Ober- und Unterschenkel für zusätzlichen Halt.



Easyglide-Gelenke zur Entlastung des Kniegelenks und Unterstützung der physiologischen Roll-Gleit-Bewegung.




Integrierte Silicon-Pelotte mit 3D-Profil für einen sanften Massageeffekt.



Grip-Ons: Seitliche Griffknoppen erleichtern zusätzlich das Anziehen.



Silber

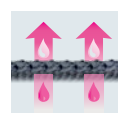


Clima Comfort




Clima Fresh



Comfort Zone

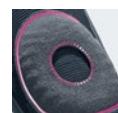

Open enclosure

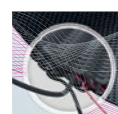

New knit tech



Non-Slip

Varianten



Genumedi® pro extraweit mit Haftband

Zweckbestimmung: Genumedi® pro ist eine Knieführungsohrthese ohne Extensions- / Flexionsbegrenzung.

Stabimed® pro RICE

Kurze Softorthese mit Hyperextensionsschutz

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.0067



medi Rehab® one
zur Ödemtherapie (S. 8)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.:

- Bei Knieinstabilitäten
- Nach Meniskusverletzungen
- Nach endoprothetischen Eingriffen
- Bei Kniegelenkarthrose

Therapeutischer Nutzen:

- Kühlen kann Schmerzen reduzieren
- Kompression kann Schwellungen reduzieren und einer Ödembildung entgegenwirken
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks
- Gel-Kühlkompressen mit Patella-Aussparung zur Kältetherapie
- Ein-Kammer-Luftsystem mit Luftpumpe inkl. Ventilknopf zur Druckregulierung für eine einfache und eine individuelle Anpassung der Kompression

Warum Stabimed® pro RICE?

- Softorthese zur Knie-Führung mit optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion

Produkt-Vorteile



Die Aluminiumschienen sind individuell anpassbar und geben eine gute Stabilität.



Zwei breite Gurte, die leicht zu greifen sind und eine angenehme Polsterung haben.



Ein-Kammer-Luftsystem mit Luftpumpe inkl. Ventilknopf zur Druckregulierung für eine einfache Bedienung und eine schnelle individuelle Anpassung.



Leichte Handhabung da die Orthese von vorne auf das Knie gelegt werden kann.

Schwarz

Stabimed® RICE

Kurze Softorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.1051

medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 8)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks und/oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Seitenbandverletzungen
- Nach Meniskusverletzungen
- Nach endoprothetischen Eingriffen
- Bei Knieinstabilitäten
- Bei Kniegelenkarthrose

Therapeutischer Nutzen

- Kühlen kann Schmerzen reduzieren
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks
- Gel-Kühlkompressen mit Patella-Aussparung zur Kältetherapie


Warum Stabimed® RICE?

- Softorthese mit physioglide Gelenk zur sicheren Positionierung am Bein und optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion


Produkt-Vorteile



Ein-Kammer-Luftsystem mit Luftpumpe inkl. Ventilknopf zur Druckregulierung für eine einfache Bedienung und eine schnelle individuelle Anpassung.

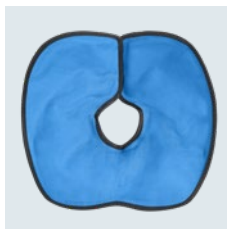

zwei Kühlkompressen zum Wechsel während der Kühlanwendung.

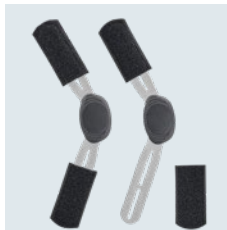

Die Aluminiumschienen sind individuell anpassbar und geben eine gute Stabilität.



Zwei breite Gurte, die leicht zu greifen sind und eine angenehme Polsterung haben.

Schwarz

Zweckbestimmung: Stabimed® RICE ist eine Knieführungsorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung.

Stabimed® pro

Kurze Softorthese mit
Hyperextensionsschutz

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.0015



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.:

- Bei Knieinstabilitäten
- Nach Meniskusverletzungen
- Bei Kniegelenkarthrose

Therapeutischer Nutzen

- Kurze Softorthese mit Hyperextensionsbegrenzung
- Das kompressive Abstandsgestrick kann die Propriozeption verbessern. Eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks

Warum Stabimed® pro?

- Verbesserung der Propriozeption durch kompressives Gestrick

Produkt-Vorteile



Angenehmes Tragegefühl und hohe Atmungsaktivität durch spezielle Stricktechnologie im Bereich der Kniekehle.




Schnelle und einfache Handhabung dank Schlupf-Variante.



Polyzentrisches Gelenk und Gelenkschienen durch Polstermaterial abgedeckt.

Grau

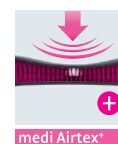

Schlupf-Variante

Stabimed®

Kurze Softorthese mit
Extensions- / Flexionsbegrenzung

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.1011

medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 8)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Seitenbandverletzungen
- Bei Knieinstabilitäten
- Nach Meniskusverletzungen
- Bei Kniegelenkarthrose

Therapeutischer Nutzen

- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks
- Das kompressive Abstandsgestrick kann die Propriozeption verbessern. Eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen:
Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: -5°, 0°, 10°, 20°, 30°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - Ruhigstellung: 0°, 10°, 20°, 30°

Warum Stabimed®?


- Sichere Positionierung am Bein durch physioglide Gelenk
- Verbesserung der Propriozeption durch kompressives Gestrick
- Umfangreiches Keileset inklusive 5° Hyperextensionskeil

Produkt-Vorteile




Angenehmes Tragegefühl und hohe Atmungsaktivität durch spezielle Stricktechnologie im Bereich der Kniekehle.

Grau

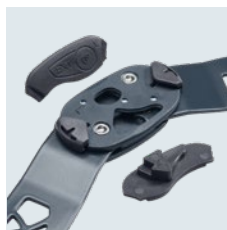

Umfangreiches Keile-Set zur flexiblen Extensions- und Flexionsbegrenzung

- inklusive 5 Grad Hyperextensionskeil
- werkzeugfreier Keilewechsel möglich

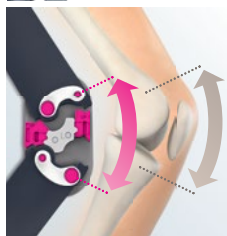

Das physioglide Gelenk ahmt die Roll-Gleit-Bewegung des Knies nach und unterstützt den sicheren Sitz am Bein.



Wrap-Variante

Zweckbestimmung: Stabimed® ist eine Knieführungsorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung.

Collamed® / Collamed® long

Lange Softorthese nach 4-Punkt-Prinzip
mit Extensions- / Flexionsbegrenzung

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.2008

medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 8)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Seitenbandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Kreuzbandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Bei Knieinstabilitäten
- Nach Meniskusverletzungen
- Bei Kniegelenkarthrose


Therapeutischer Nutzen

- Lange Softorthese mit Extensions- und Flexionsbegrenzung
- Stabilisierung des Kniegelenks durch 4-Punkt-Stabilisierungsprinzip
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks durch lange seitliche Schienen
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: -5°, 0°, 10°, 20°, 30°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - Ruhigstellung: 0°, 10°, 20°, 30°


Warum Collamed® / Collamed® long?

- Sichere Positionierung am Bein durch physioglides Gelenk
- Verbesserung der Propriozeption durch kompressives Gestrick
- Umfangreiches Keileset inklusive 5° Hyperextensionskeil


Produkt-Vorteile

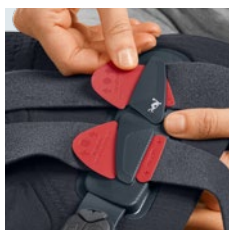

Gurteinstellhilfen für das 4-Punkt-Prinzip. Vorteil: Keine Gurtverschlüsse auf der Beintrückseite für mehr Tragekomfort. (Gurteinstellhilfen sind im Lieferumfang enthalten).

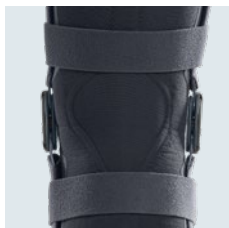


Angenehmes Tragegefühl und hohe Atmungsaktivität durch spezielle Stricktechnologie im Bereich der Kniekehle.

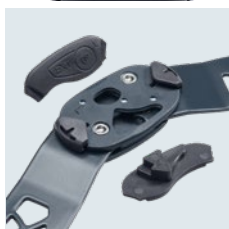

Umfangreiches Keile-Set zur flexiblen Extensions- und Flexionsbegrenzung

- inklusive 5 Grad Hyperextensionskeil
- werkzeugfreier Keilewechsel möglich

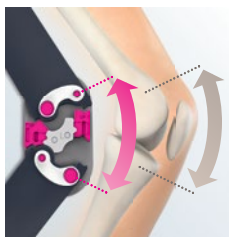

Das physioglides Gelenk ahmt die Roll-Gleit-Bewegung des Knies nach und unterstützt den sicheren Sitz am Bein.

Grau



Wrap-Variante



Collamed® long

Zweckbestimmung: Collamed® ist eine Knieführungsorthese mit 4-Punkt-Prinzip und Extensions- / Flexionsbegrenzung.

medi PT control®

Orthese mit einstellbaren Gelenken zur Korrektur und Sicherung des Patellagleitweges

Hilfsmittelnummer: 23.04.05.2003

medi Rehab® one zur Ödemtherapie (S. 8)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Korrektur und / oder Entlastung und Sicherung des Patellagleitweges in definierten Bewegungsumfängen notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Patellaluxation (konservativ / postoperativ)
- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Bei lateralem Malalignment und begleitender Knieinstabilität
- Nach retropatellarer Knorpelchirurgie


Therapeutischer Nutzen

- Führung und Stabilisierung der Patellabewegung durch mitgleitenden Führungsbügel. Einer Lateralisierung der Patella wird entgegengewirkt
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks durch seitliche Schienen
- Führung und Stabilisierung der Kniebewegung in einstellbaren Bewegungsumfängen
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°


Warum medi PT control®?

- Führung und Stabilisierung der Patellabewegung durch mitgleitenden Führungsbügel

Produkt-Vorteile

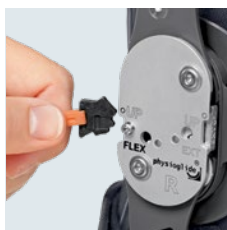

Die Gelenkkonstruktion ermöglicht einen werkzeugfreien Keilewechsel – mit Pinzette in jeder Gelenkabdeckung.

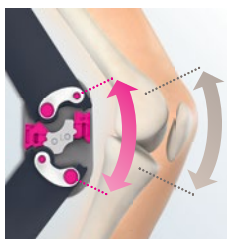

Das physioglide Gelenk ahmt die Roll-Gleit-Bewegung des Knies nach und unterstützt den sicheren Sitz am Bein.



Angenehmes Tragegefühl und hohe Atmungsaktivität durch Netzmaterial im Bereich der Kniekehle.

Silikon-Punkt-Beschichtung unterstützt den sicheren Sitz am Bein.

Grau



medi Airtex®



Wrap-Variante



Schlupf-Variante

Zweckbestimmung: medi PT control® ist eine Orthese mit einstellbaren Gelenken zur Korrektur und Sicherung des Patellagleitweges.

M.4s® comfort

**4-Punkt-Hartrahmenorthese
mit Extensions- / Flexionsbegrenzung**

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.3013

medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 8)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine physiologische Führung und Stabilisierung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates in mindestens zwei Ebenen notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Kreuzbandrupturen (konservativ / postoperativ)
- Nach Seitenbandrupturen (konservativ / postoperativ)
- Bei Knieinstabilitäten
- Nach Meniskuseingriffen
- Nach Knorpel Eingriffen

Therapeutischer Nutzen

- Stabilisierung des Kniegelenks durch 4-Punkt-Stabilisierungsprinzip
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks durch festen Rahmen
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: -5°, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Warum M.4s® comfort?

- Physioglide Gelenk unterstützt den sicheren Sitz am Bein
- Umfangreiches Keileset inklusive 5° Hyperextensionskeil


Produkt-Vorteile



Mit dem 5-Grad-Hyperextensionskeil kann bei Bedarf eine leichte Überstreckung ermöglicht werden.



Die Gelenkkonstruktion ermöglicht einen werkzeugfreien Keilewechsel – mit Pinzette in jeder Gelenkabdeckung.


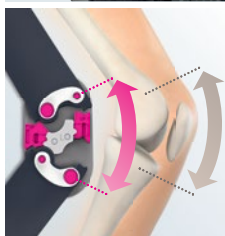


Das physioglide Gelenk ahmt die Roll-Gleit-Bewegung des Knies nach und unterstützt den sicheren Sitz am Bein.

Zubehör



Erhältlich mit Kühlkompressen in der Produktverpackung.

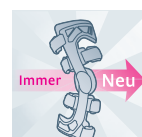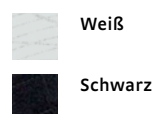

Sorglospaket

Weitere Informationen zum medi Sorglospaket finden Sie unter: medi.biz/slp

M.4s[®] PCL dynamic

Hartraahmenorthese mit Extensions- /
Flexionsbegrenzung

Hilfsmittelnummer beantragt für 23.04.xx.xxxx

Weitere Produkte für
die HKB-Therapie:
medi PTS (S. 29)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine physiologische Führung und Stabilisierung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates in mindestens zwei Ebenen notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Verletzung des hinteren Kreuzbandes (konservativ / postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Stabilisierung des Kniegelenks durch 4-Punkt-Stabilisierungsprinzip
- Durch die aktive Krafteinwirkung über das Unterstützungspad wird die Tibia in der gewünschten Position gehalten
- Führung und Stabilisierung der Kniebewegung in einstellbaren Bewegungsumfängen
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks durch festen Rahmen
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Warum M.4s PCL dynamic?

- Individuell einstellbares Wadenpad zur sicheren Positionierung der Tibia


Produkt-Vorteile



Die Flügelform des Tibia-Polsters passt sich an die anatomische Form des Schienbeins an. Der Druck verteilt sich angenehm.



Das integrierte Drehrad ermöglicht eine exakte und individuelle Einstellung des Unterstützungspads.

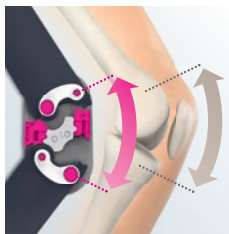

Das physioglide Gelenk ahmt die Roll-Gleit-Bewegung des Knies nach und unterstützt den sicheren Sitz am Bein.

Zubehör




Erhältlich mit Kühlkompressen in der Produktverpackung.

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder Short-URL medi.biz/pcl zu den therapiebegleitenden Übungen

Schwarz

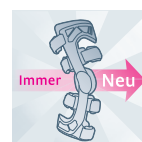

Sorglospaket

Weitere Informationen zum medi Sorglospaket finden Sie unter: medi.biz/slp

Zweckbestimmung: M.4s PCL dynamic ist eine Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions- / Flexionsbegrenzung.

M.4 X-lock®

**4-Punkt-Hartrahmenorthese
mit Extensions- / Flexionsbegrenzung**

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.3013



medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 8)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine physiologische Führung und Stabilisierung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates in mindestens zwei Ebenen notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Meniskuseingriffen
- Nach Knorpel Eingriffen
- Postoperativ nach Patellasehnenruptur und / oder Quadricepssehnenruptur
- Postoperativ nach Kniegelenksfraktur
- Nach Fesselungsoperationen der Kniegelenke (MPFL)
- Konservativ nach Patellaluxation
- Nach Kreuzbandrupturen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Seitenbandrupturen (posttraumatisch / postoperativ)
- Bei Knieinstabilitäten

Therapeutischer Nutzen

- Die Lock-Funktion ermöglicht bei Bedarf therapiegerechte Belastungen in Vollexension (axiale Belastung) bzw. frühfunktionelle Übungen im unbelasteten Zustand
- Das Gelenk ermöglicht eine einfache Umstellung zwischen Ruhigstellung in Vollexension und Bewegungsfreiheit in definierten Umfängen
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks durch festen Rahmen


Warum M.4 X-lock®?

- Lockmechanismus zum schnellen Wechsel für Ruhigstellung in Extension

Produkt-Vorteile



Der Lock-Mechanismus ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen Ruhigstellung in Streckung und Bewegungsfreiheit in definierten Umfängen (Range of motion)

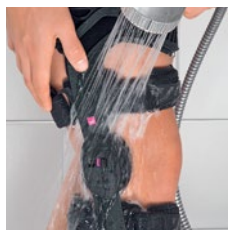

Wasserabweisendes Polstermaterial – Orthese kann auch während des Duschens getragen werden.




Die geteilten Gurtpolster (an Gurt 4) können individuell platziert werden. Das kann ungewünschten Druck auf OP-Wunde vermeiden.

Zubehör



Erhältlich mit Kühlkomresse in der Produktverpackung.

Schwarz

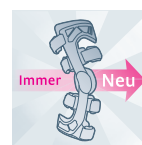

Sorglospaket

Weitere Informationen zum medi Sorglospaket finden Sie unter:
medi.biz/slp



**Unlocked-Modus
bei unbelastetem
Bein in Flexion**



**Lock-Modus
bei Vollexension**

medi[®] ROM

Universalknieschiene
zur Mobilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.04.02.0006

medi Rehab[®] one zur
Ödemtherapie (S. 8)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks
- Ruhigstellung in einstellbarer Position
- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen
- Kontrollierte Mobilisierung des Kniegelenks durch variable Extensions- bzw. Flexionsbeschränkungen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°

Warum medi ROM?

- Stufenweise Einstellung von Extension und Flexion durch medi Quick-Set-Gelenk
- Individuell anpassbares Polstermaterial

Produkt-Vorteile



Einfache Einstellung von Extension und Flexion durch medi Quick-Set-Gelenk.

Einfache Handhabung durch breitflächige Gurte mit praktischen Schnellverschlüssen.

Hautfreundliches Innenmaterial für hohen Tragekomfort.

Guter Sitz durch individuell anpassbare Gurte.

Kürzbare Gelenkschienen und Polster zur individuellen Anpassung.

Grau



medi Kidz –
Auch als medi
Kidz Version
erhältlich.



medi[®]ROM Kidz

medi® Classic

Knieorthese zur Immobilisierung

Hilfsmittelnummer:

0° 23.04.01.0009

20° 23.04.01.1003



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter / gebeugter Position notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Patellaluxation
- Nach kniegelenknahen Frakturen

Therapeutischer Nutzen

- Ruhigstellung in gestreckter bzw. gebeugter Position
- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen

Warum medi Classic?


- Optimales An- und Ablegen durch offene Wickel-Version
- Hautfreundliches, luftdurchlässiges Material und herausnehmbare Stabilisierungsstäbe

Produkt-Vorteile

Einfaches An- und Ablegen ohne Anwinkeln des Knies durch offene Wickelkonstruktion.

Individuelle Anpassung an Beinumfang durch 3-teilige Konstruktion und Klettverschlusstechnik.

Angenehmes, hautfreundliches Material, waschbar.

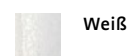

Weiß



medi Kidz – medi classic auch als medi Kidz Version erhältlich.



medi® Classic Kidz

medi[®] Classic air

Knieorthese zur Immobilisierung

Hilfsmittelnummer:

0° 23.04.01.0009

20° 23.04.01.1003



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter / gebeugter Position notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Patellaluxation
- Nach kniegelenknahen Frakturen

Therapeutischer Nutzen

- Ruhigstellung in gestreckter bzw. gebeugter Position
- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen

Warum medi Classic air?

- Optimales An- und Ablegen durch offene Wickel-Version
- Hautfreundliches, luftdurchlässiges Material und herausnehmbare Stabilisierungsstäbe

Produkt-Vorteile

Einfaches An- und Ablegen ohne Anwinkeln des Knies durch offene Wickelkonstruktion.

Individuelle Anpassung an Beinumfang durch 3-teilige Konstruktion und Klettverschlussstechnik.

Angenehmes, hautfreundliches Material, waschbar.



Grau

Zweckbestimmung: medi Classic air ist eine Knieorthese zur Immobilisierung.

Das medi Sorglospaket für Knieorthesen

Das medi Sorglospaket bietet Ihnen ein System mit dem Sie Ihre Patienten mit immer neuen, auf Keimarmut geprüften Orthesen versorgen. Vertrauen Sie auf bewährte medi Qualität – der Sicherheit zuliebe.

Seit 2004 werden Orthesen von den Verbänden der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Mietsystem mit Wiedereinsatz angeboten. Die Wiederaufbereitung von Knieorthesen ist grundsätzlich möglich. Dabei sind jedoch umfangreiche Richtlinien vom Robert-Koch-Institut (RKI) sowie der Europäischen Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 MDR zu erfüllen. Der Wiederaufbereitende trägt die Verantwortung für die medizinisch, hygienisch und gesundheitlich einwandfreie Qualität der Orthesen.

Nach einem Gutachten von Prof. Dr. med. Franz Daschner können Orthesen nach dem Tragen nicht nur mit Hautflora und Schimmelpilzen, sondern auch mit pathogenen Keimen belegt sein.* Mit dem medi Sorglospaket erhalten Sie immer neue und auf Keimarmut geprüfte Orthesen, für die Versorgung Ihrer Patienten.

Das medi SLP Portal ermöglicht Ihnen zudem eine einfache und transparente Orthesen- und Patientenverwaltung – für ein effektives Arbeiten, auch filialübergreifend. Mit wenigen Klicks können Sie jederzeit die neuesten Informationen zu Ihren Orthesen abrufen oder ändern.

Die kostenlose medi SLP App.

Sie können den gesamten Versorgungsprozess jetzt auch bequem und mobil per App durchführen – ideal für die Arbeit im Außendienst. Mit nur wenigen Klicks erhalten Sie eine Übersicht aller aktuell verfügbarer Orthesen. Besonders praktisch: Einfach den Barcode scannen und so noch schneller die gewünschte Orthese erfassen.

Über den einfachen Rezept-Scan können Sie die benötigten Patientendaten in der App erfassen und das gewünschte Hilfsmittel direkt abgeben.


Zusätzliches Plus:

Der Abgabeprozess der Orthesen über die medi SLP App funktioniert auch offline. Ihre Daten werden automatisch zwischengespeichert. Sobald Sie wieder online sind, wird der Prozess abgeschlossen und die Daten werden mit dem medi SLP Portal synchronisiert.

Weitere Informationen zur medi SLP App erhalten Sie unter www.medi.biz/slp.



Sie sind bereits überzeugt? Dann laden Sie sich die App direkt kostenlos auf Ihr Smartphone. Scannen Sie dafür einfach den QR-Code, um zum Download-Bereich zu gelangen. Die App ist für Apple- und Android-Geräte verfügbar.

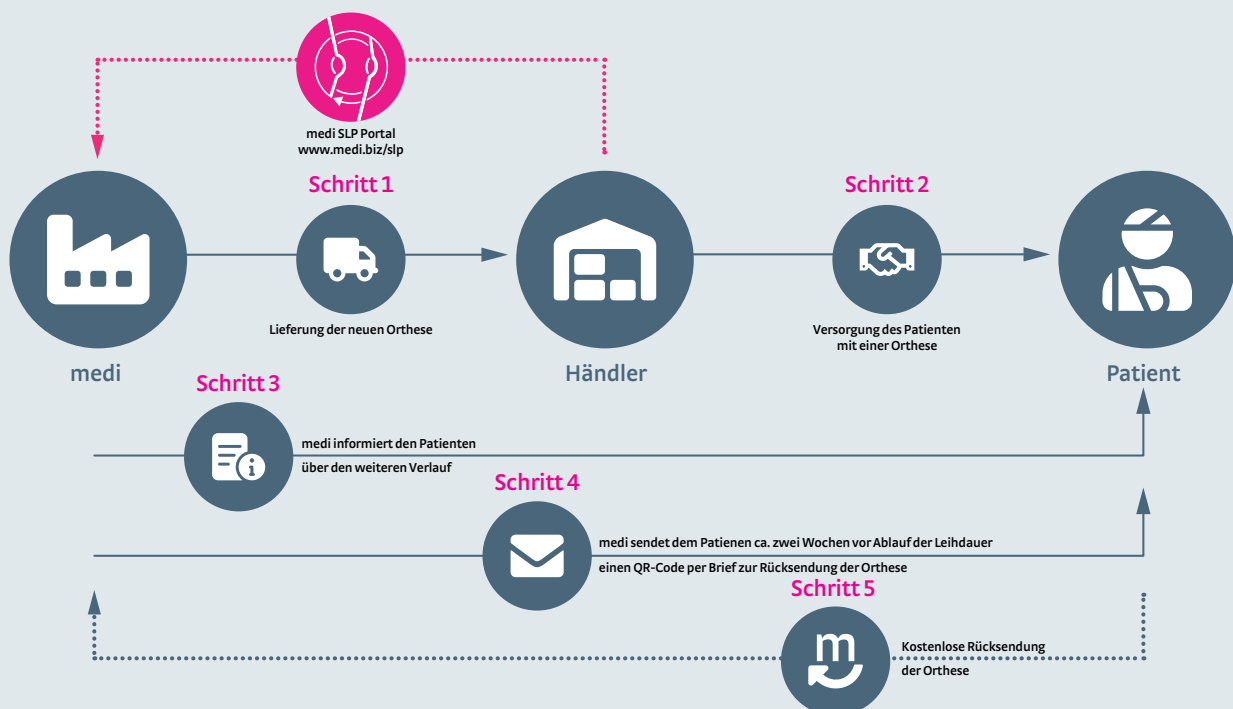

* Stellungnahme zur hygienischen Aufbereitung von Knie-Orthesen, Prof. Dr. med F. Daschner, Dr. med S. Wenzler-Röttle, PD Dr. med M. Dettkenkofer, Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene, Universitätsklinikum Freiburg, Dezember 2005

Unsere Unterstützung für Sie und Ihr Patient:innen-Gespräch

Wir unterstützen Sie mit anschaulichem Informationsmaterial für Sie und Ihre Patient:innen.

Produkt-Informationen für Sie und Ihre Patient:innen



**Kitteltaschenkatalog
medi Orthopädie**
Art.-Nr. 0030001



**Verordnungshilfe
Knie**
Art.-Nr. 0031111



**Arzt-FH Broschüre
spezifischer Knieschmerz**
Art.-Nr. 0030245



**Verordnungshilfe
DiGA my companion**
Art.-Nr. 0030130

Informationen für Ihr Patient:innen-Gespräch



**Ratgeber
Knie-Instabilität**
Art.-Nr. 0030247



**Ratgeber
Pes anserinus**
Art.-Nr. 0030246



**Ratgeber
Vorderer Knieschmerz**
Art.-Nr. 0030078




**Ratgeber
Patellaspitzensyndrom**
Art.-Nr. 0030026




**Ratgeber
DiGA**
Art.-Nr. 0030199

Diese Broschüren sind in 25er Verpackungseinheit und als Einzelstück erhältlich.

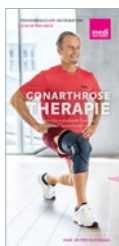

**Ratgeber
Gonarthrose**
Art.-Nr. 0031023

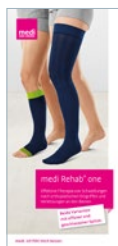

**Ratgeber medi
Rehab one**
Art.-Nr. 0030124



Das Plus für Ihre Arbeit

Wissenswertes zur Hilfsmittelverordnung

Maximale Patienten-Compliance

Hilfsmittel sind sachlich medizinische Leistungen, wie Bandagen oder Orthesen (§33 SGB V). Sie sind nicht zu verwechseln mit Heilmitteln (medizinische Dienstleistungen, wie Physiotherapie §32 SGB V). Grundsätzlich gilt: Die Hilfsmittel-Verordnung geht der Heilmittel-Verordnung vor (§ 9 Abs. 1 HeilM-RL).

Begründungstexte für Ihre Verordnung

Hilfsmittel können budgetfrei verordnet werden. Je ausführlicher und differenzierter Ihre Verordnung ist, desto einfacher können Krankenkassen Art und Umfang der Versorgung nachvollziehen. Eine exakte Begründung reduziert den Aufwand für Sie und die Krankenkassen.

Rezeptbeispiel medi® Smartfit OA

Krankenkasse bzw. Kostenträger:

Name, Vorname des Versicherten:

Kassen-Nr.: Versicherten-Nr.: Status:

Vertragsarzt-Nr.: VK gültig bis: Datum:

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

23.04.04.1035

Mediale Gonarthrose

1 Stück medi® Smartfit OA

rechtes Knie

Individuell regulierbare Entlastung durch 3-Punkt-Prinzip durch bidirektional einstellbaren Seilmechanismus.

Rezeptierungsbeispiel

Für die eindeutige Verordnung eines medi Produktes sind folgende Rezeptangaben nötig:

- 1 Feld Nummer 7 (orthopädische Hilfsmittel sind budgetfrei)
- 2 Hilfsmittelnummer (im begründeten Einzelfall 10-stellig)
- 3 genaue Indikation / Diagnose (ICD-10)
- 4 **Produktname und Anzahl (1 Stück)**
- 5 weitere Hinweise für die individuelle Versorgung (rechts / links)
- 6 Begründung der Einzelproduktverordnung

Warum gerade medi Smartfit OA?

Welche Vorteile das medi Produkt Ihren Patienten bietet, finden Sie im Abschnitt „Warum“ auf der jeweiligen Produktseite.

Rezeptbeispiel DiGA

Krankenkasse bzw. Kostenträger:

Name, Vorname des Versicherten:

Kassen-Nr.: Versicherten-Nr.: Status:

Vertragsarzt-Nr.: VK gültig bis: Datum:

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

PZN 17850263

Digitale Gesundheitsanwendung (kurz DiGA)

Patellafemorales Schmerzsyndrom

companion patella

Algorithmus gesteuerte und adaptive Bewegungstherapie, ortsunabhängig und jederzeit anwendbar. Ziel ist die Verbesserung der Kniefunktion und des Schmerzzustandes bei Vorderem Knie Schmerz.

Kooperationspartner von medi



Offizieller Förderer der deutschen Kniegesellschaft e.V.



Offizieller Kooperationspartner der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie



Partner der Verbandsärzte Deutschland e. V.



Empfohlener Partner der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin



Das medi Knie-Programm

Alle Produkte sowie die wichtigsten Indikationen auf einen Blick

Produkt / Hilfsmittelnr.	Beschreibung	Indikationen	Warum gerade?
	companion® patella proved by Dt. Kniegesellschaft PZN-Nr. 17850263	Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) für Patienten mit vorderem spezifischem Knieschmerz	• Patellaspitzensyndrom • Patellofemorales Schmerzsyndrom • Patellaerstluxation Algorithmus gesteuerte, adaptive Bewegungstherapie, ortsunabhängig und jederzeit anwendbar. Ziel ist die Verbesserung der Kniefunktion und des Schmerzzustandes bei Vorderem Knieschmerz.
	medi Rehab® one 17.06.03.0103	Rundgestrickter medizinischer Kompressionstrumpf	Ödeme • Posttraumatische Ödeme • Postoperative Ödeme Positionierungshilfe Knie für leichte und korrekte Handhabung.
	Genumedi® / Genumedi® E'motion® 05.04.01.0009	Komfort-Kniebandage zur Weichteilkompression mit 3D-Silikon-Pelotte	Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit lokaler /lokalen Druckpelotte(n) um die Kniescheibe notwendig ist, wie z. B.: • Leichte Instabilitäten • Arthrose und Arthritis • Patellofemorales Schmerzsyndrom Minimierung des retro-patellaren Drucks durch offene Einfassung des Patella-Silikonrings.
	Genumedi® PA 23.04.05.0019	Knieorthese zur Entlastung des Sehnenansatzes Pes anserinus	Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges und benachbarter anatomischer Strukturen (z.B. Pes anserinus) notwendig ist, wie z. B.: • Pes anserinus Syndrom • Pes anserinus Bursitis • Pes anserinus Tendinopathie • Postoperative Schmerzzustände am Pes anserinus • Patellofemorales Schmerzsyndrom • Arthrose und Arthritis Individuelle und punktgenaue Entlastung des Sehnenansatzes Pes anserinus.
	Genumedi® PT 23.04.05.0012	Knieorthese zur Verbesserung der Patellaführung	Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, wie z. B.: • Patellofemorales Schmerzsyndrom • Patella maltracking • Lateralisierung der Patella • Hypermobiler Patella • Malalignment • Patella (Sub-)Luxation Wiederherstellung des muskulären Gleichgewichts mittels Detonisierung des M. vastus lateralis über TrP1. Minimierung des retropatellaren Drucks durch offene Einfassung des Patella-Silikonrings.
	Genumedi® PSS 23.04.05.0015	Knieorthese zur Entlastung der Patellasehnenansätze	Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, wie z. B.: • Patellaspitzensyndrom (Jumper's Knee) • Morbus Osgood-Schlatter • Patellofemorales Schmerzsyndrom Kombination aus kompressivem Gestrick, Silikon-Pelotten und Patellasehnenband mit individueller Druckeinstellung über versetztes Gurtsystem.
	Genumedi® pro 23.04.03.0061	Knieorthese zur Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks	Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.: • Leichte bis mittlere Instabilitäten des Kniegelenks • Gonarthrose • Leichte Seitenbandinstabilitäten Sichere Positionierung am Bein durch Easyglide-Gelenk und anatomisch vorgeformte Gurte.
	Stabimed® pro RICE 23.04.03.0067	Kurze Softorthese mit Hyperextensionschutz	Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.: • Bei Knieinstabilitäten • Nach Meniskusverletzungen • Nach endoprothetischen Eingriffen • Bei Kniegelenkarthrose Softorthese zur Knieführung mit optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion.

Produkt / Hilfsmittelnr.	Beschreibung	Indikationen	Warum gerade?	
	Stabimed® RICE 23.04.03.1051	Kurze Softorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung	Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie z. B.: • Nach Seitenbandverletzungen • Nach Meniskusverletzungen • Nach endoprothetischen Eingriffen • Bei Knieinstabilitäten • Bei Kniegelenkarthrose	Softorthese zur Knieführung mit optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion.
	Stabimed® pro 23.04.03.0015	Kurze Softorthese mit Hyperextensionschutz	Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.: • Bei Knieinstabilitäten • Nach Meniskusverletzungen • Bei Kniegelenkarthrose	Verbesserung der Propriozeption durch kompressives Gestrück.
	Stabimed® 23.04.03.1011	Kurze Softorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung	Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie z. B.: • Nach Seitenbandverletzungen • Bei Knieinstabilitäten • Nach Meniskusverletzungen • Bei Kniegelenkarthrose	Sichere Positionierung am Bein durch physioglide Gelenk. Verbesserung der Propriozeption durch kompressives Gestrück. Umfangreiches Keileset inklusive 5° Hyperextensionskeil.
	Collamed® / Collamed® long 23.04.03.2008	Lange Softorthese nach 4-Punkt-Prinzip mit Extensions- / Flexionsbegrenzung	Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks und/oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie z. B.: • Nach Seitenbandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ) • Nach Kreuzbandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ) • Bei Knieinstabilitäten • Nach Meniskusverletzungen • Bei Kniegelenkarthrose	Sichere Positionierung am Bein durch physioglide Gelenk. Verbesserung der Propriozeption durch kompressives Gestrück. Umfangreiches Keileset inklusive 5° Hyperextensionskeil.
	medi® PT control 23.04.05.2003	Orthese mit einstellbaren Gelenken zur Korrektur und Sicherung des Patellagleitweges	Alle Indikationen, bei denen eine Korrektur und / oder Entlastung und Sicherung des Patellagleitweges in definierten Bewegungsumfängen notwendig ist, wie z. B.: • Nach Patellaluxation (konservativ / postoperativ) • Patellofemorales Schmerzsyndrom • Bei lateralem Malalignment und begleitender Knieinstabilität • Nach retropatellarer Knorpelchirurgie	Führung und Stabilisierung der Patellabewegung durch mitgleitenden Führungsbügel.
	medi® Soft OA light 23.04.04.0004	Knie-Softorthese zur Entlastung	Alle Indikationen, die eine Entlastung eines Kompartiments nach 3-Punkt-Entlastungsprinzip und zusätzliche physiologische Führung des Kniegelenks benötigen, wie z. B.: • Bei unilateraler Kniegelenkarthrose • Nach Meniskuseingriffen	Individuell und einfach einstellbare Varus / Valgus-Entlastung über diagonales Gurtsystem. Einfaches Anziehen durch Schlupf-Wickelversion.
	medi® Smartfit OA 23.04.04.1035	Knie-Softorthese zur Entlastung und Führung	Alle Indikationen, die eine Entlastung eines Kompartiments nach 3-Punkt-Entlastungsprinzip, eine zusätzliche physiologische Führung und gegebenenfalls eine Bewegungseinschränkung des Kniegelenks benötigen, zum Beispiel: • Bei unilateraler Kniegelenksarthrose • Nach Knorpelchirurgie oder Knorpelaufbau • Nach Meniskuseingriffen	Individuell regulierbare Entlastung durch 3-Punkt-Prinzip durch bidirektional einstellbaren Seilmechanismus
	M.4s® comfort 23.04.03.3013	4-Punkt Hart-rahmenorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung	Alle Indikationen, bei denen eine physiologische Führung und Stabilisierung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates in mindestens zwei Ebenen notwendig ist, wie z. B.: • Nach Kreuzbandrupturen (konservativ / postoperativ) • Nach Seitenbandrupturen (konservativ / postoperativ) • Bei Knieinstabilitäten • Nach Meniskuseingriffen • Nach Knorpel eingriffen	Physioglide Gelenk unterstützt den sicheren Sitz am Bein. Umfangreiches Keileset inklusive 5° Hyperextensionskeil. medi Sorglospaket: immer neue und auf Keimarmt geprüfte Orthese.

Produkt / Hilfsmittelnr.	Beschreibung	Indikationen	Warum gerade?
 M.4s® PCL dynamic Beantragt für 23.04.xx.xxxx	Hartrahmenorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung	Alle Indikationen, bei denen eine physiologische Führung und Stabilisierung des Kniegelenks und/oder Entlastung des Gelenkapparates in mindestens zwei Ebenen notwendig ist, wie z. B.: Nach Verletzung des hinteren Kreuzbandes (konservativ / postoperativ)	Individuell einstellbares Wadenpad zur Positionierung und Stabilisierung der Tibia. medi Sorglospaket: immer neue und auf Keimarmt geprüfte Orthese.
 M.4 X-lock® 23.04.03.3013	4-Punkt Hart- rahmenorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung	Alle Indikationen, bei denen eine physiologische Führung und Stabilisierung des Kniegelenks und/oder Entlastung des Gelenkapparates in mindestens zwei Ebenen notwendig ist, wie z. B.: - Nach Meniskuseingriffen - Nach Knorpel Eingriffen - Postoperativ nach Patellasehnenruptur und / oder Quadricepssehnenruptur - Postoperativ nach Kniescheibenfraktur - Nach Fesselungsoperationen der Kniescheibe (MPFL) - Konservativ nach Patellaluxation - Nach Kreuzbandrupturen (posttraumatisch / postoperativ) - Nach Seitenbandrupturen (posttraumatisch / postoperativ) - Bei Knieinstabilitäten	Lockmechanismus zum schnellen Wechsel für Ruhigstellung in Extension. medi Sorglospaket: immer neue und auf Keimarmt geprüfte Orthese.
 M.4s® OA comfort 23.04.04.2003	4-Punkt Hart- rahmenorthese zur Varus- /Valgusentlas- tung und Stabilisi- erung	Alle Indikationen, die eine Entlastung eines Kompartiments nach dem 3-Punkt-Prinzip, eine physiologische Führung und Stabilisierung nach dem 4-Punkt-Prinzip und ggf. eine Bewegungseinschränkung des Kniegelenks benötigen, wie z. B.: - Schwere mediale oder laterale Gonarthrose (mind. Grad III) in Verbindung mit komplexer Bandinstabilität - Vor HTO (Umstellungsosteotomie) zur unikompartimen- tellen Entlastung bei schwerer Gonarthrose (Brace-Test) - Nach Knorpelchirurgie oder Knorpelaufbau - Nach Meniskuseingriffen	Zuverlässige Druckentlas- tung betroffener Strukturen durch gelenknahe Varus- / Valgus-Einstellgelenke. medi Sorglospaket: immer neue und auf Keimarmt geprüfte Orthese.
 medi® ROM 23.04.02.0006	Universalknieschiene zur Mobilisierung	Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.: - Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ) - Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ) - Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)	Stufenweise Einstellung von Extension und Flexion durch medi Quick-Set-Gelenk. Individuell anpassbares Polstermaterial.
 medi® PTS 23.04.01.3002	Knieorthese zur Immobilisierung und Entlastung des hinteren Kreuzbandes	Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung und Entlastung des Kniegelenks in mindestens einer Ebene notwendig ist, wie z. B.: - Nach hinteren Kreuzbandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ) - Nach Knieluxation (postoperativ) - Nach komplexen Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ) - Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)	Entlastung des hinteren Kreuzbandes durch posterior tibiales Kissen.
 medi® Classic / medi® Classic air 0° 23.04.01.0009 20° 23.04.01.1003 medi® Jeans 0° 23.04.01.0010 30° 23.04.01.1004	Knieorthese zur Immobilisierung	Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter / gebeugter Position notwendig ist, wie z. B.: - Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ) - Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ) - Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ) - Nach Patellaluxation - Nach kniegelenknahen Frakturen	Optimales An- und Ablegen durch offene Wickel-Version. Hautfreundliches, luft- durchlässiges Material und herausnehmbare Stabilisierungsstäbe.



medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-333
F +49 921 912-57
OrderOrthopaedie@medi.de
www.medi.de



4 049772 352586

0030409 / 12.2025