



medi

Bestellblock

Spinomed® active
Spinomed® active men

97,3 %
Weiterempfehlung*

Patienten begeistern

Damit Rückenorthesen ihre Wirkung bestmöglich entfalten können, müssen sie regelmäßig getragen werden. Patienten sollen sich also in erster Linie wohlfühlen. Ein Aspekt, der nur funktioniert, wenn die Orthese im Vorfeld korrekt angemessen und angepasst wurde.

Spinomed active – weshalb ist gerade hier die Passform so wichtig?

**Nur was passt, wirkt auch. In der Osteoporose-
Therapie ist der Tragekomfort deshalb das A und O.**

Ziel der Versorgung ist es, den Oberkörper aufzurichten und die Muskeln zu aktivieren.

In der Body-Variante Spinomed active werden zugelastische Materialien eingearbeitet und Patienten tragen die Orthese direkt auf der Haut. Die Orthese muss daher so exakt wie möglich am Körper sitzen.

Mit korrektem Anmessen zum optimalen Therapie-Ergebnis

**In dieser Broschüre finden Sie Tipps und Tricks für
Ihr Beratungsgespräch und das richtige Anmessen.**

Wählen Sie mit medi aus einer hohen Vielfalt an Varianten und Größen. Nehmen Sie Maß, tragen Sie die Messpunkte auf dem Bestellblock ein und gemeinsam finden wir für Ihre Patienten die perfekt sitzende Spinomed active.

Weitere Informationen
zu den Spinomed
Rückenorthesen
finden Sie unter
folgendem QR-Code
oder der Short-URL
medi.biz/Spinomed.



medi. ich föhl mich besser.

* Quelle: medi GmbH & Co. KG, Patient:innenbefragung Spinomed 2019/2020: Subgruppenauswertung (n=153) Spinomed active



Spinomed® active

Die effektive Bodyvariante in
zwei modischen Farbvarianten.

Mit den vielfältigen Kombinationsmög-
lichkeiten der Spinomed active bieten Sie
Ihren Kundinnen eine individuelle
Auswahl in ihrer Therapie.



Beide Varianten mit
Hilfsmittelnummer:
23.15.04.4038

Spinomed® active men

Die Variante speziell für den Mann.

Ihre Kunden können die Spinomed active
men unauffällig unter der Kleidung
tragen. Mit den individuell einstellbaren
Schultergurten erzielen Sie eine hohe
Patientencompliance.



Bestellblock Spinomed® active

Unbedingt mit angezogenem BH messen!



Unterbrustumfang
waagrecht
direkt unter der Brust



Brustumfang
waagrecht, über der
stärksten Stelle der
Oberweite



Brustquernaß
vom Brustbein über
Brustmitte bis Ende der
Brustwölbung



Untere Brusthöhe
vom unteren Brust-
ansatz anliegend bis
zur Brustmitte



Schulter-Brust-Maß
anliegend von Schulter-
mitte bis Brustmitte



Taillenumfang
waagrecht um die Taille




Gesäßumfang
stärkste Stelle des
Gesäßes



Vordere Höhe
senkrecht anliegend von
Unterbrust bis Schenkel-
beuge



Rückenhöhe 1
anliegend vom 7.
Halswirbel (= C7) bis
zum Gesäßansatz
(= Beginn der Po-Spalte)

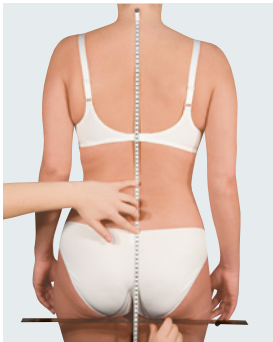

Rückenhöhe 2
ab C7 anliegend, aber ab
stärkster Stelle Gesäß
hängend bis Gesäß-
abschluss

Praxis-Tipps zum Messen

Das Unterbrustmaß sollte so
gemessen werden, dass die
Patientin noch ungehindert
atmen kann.

Bei Patientinnen mit großer
Oberweite oder stark
hängender Oberweite sollten
Sie die Träger des BHs etwas
straffer ziehen.

Arme beim Messen aller
Brustmaße immer nach unten
hängen lassen.

Notieren, wenn kein BH
getragen wird.

Eventuell Fotos mitschicken.

Um das Messen bei größeren
Umfängen zu erleichtern,
können Sie die Textilkreide zur
Kennzeichnung der Fixpunkte
verwenden.



Produktvarianten*




Mit eingearbeitetem
Cup Zwickel mit
Haken / Ösen



Ohne eingearbeiteten
Cup Zwickel mit
Klett / Flausch

* Spinomed active in schwarz erhältlich
in der Variante mit Cup

Produkt-Vorteile

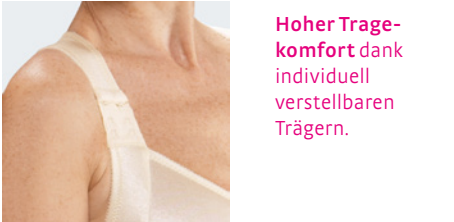

**Hoher Trage-
komfort** dank
individuell
verstellbaren
Trägern.



**Garantierte
Wirkung** durch
eingearbeitete,
zugelastete
Materialien.



**Schnelle
Anpassung** durch
den Orthopädie-
Techniker durch
kalt verformbare
Aluminiumschiene.

Produkt-Vorteile



**Hoher Trage-
komfort** dank
individuell
verstellbarer
Schultergurte.



**Einfache Hand-
habung** durch
2-Wege-Frontreiß-
verschluss.



**Schnelle
Anpassung** durch
den Orthopädie-
Techniker durch
kalt verformbare
Aluminiumschiene.